


20x SSC Solution

REF WB-0003-50

∇_{Σ} 14 (50 ml)

Für die Verwendung in *in situ* Hybridisierungen

Nur für Forschungszwecke bestimmt

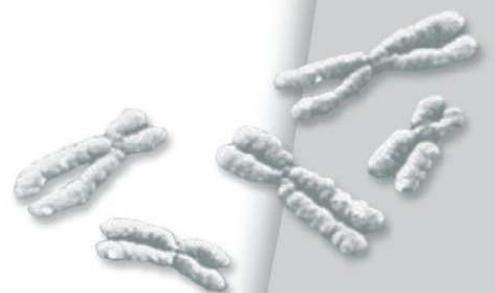

1. Bestimmung der Anwendung

Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke und nicht für den Gebrauch in diagnostischen Anwendungen bestimmt.

Die 20x SSC Solution (WB3) ist für Waschschritte in *in situ* Hybridisierungs (ISH)-Protokollen der ZytoVision bestimmt.

2. Sicherheitshinweise und Entsorgung

- ✓ Bedienungsanleitung vor Durchführung der Anwendung lesen!
- ✓ Reagenzien nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr benutzen!
- ✓ Kreuzkontaminationen und mikrobakterielle Kontaminationen der Reagenzien vermeiden!
- ✓ Der direkte Kontakt mit den Reagenzien muss vermieden werden. Entsprechende Schutzmaßnahmen sind zu treffen (Benutzung von Einmalhandschuhen, Schutzbrille und Laborbekleidung)!
- ✓ Bei Kontakt mit den Reagenzien müssen die betroffenen Stellen sofort mit viel Wasser gespült werden!
- ✓ Niemals Lösungen mit dem Mund pipettieren!
- ✓ Die Entsorgung der Reagenzien unterliegt den örtlichen Regularien!
- ✓ Ein Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage für den berufsmäßigen Verwender erhältlich!

3. Der 20x SSC Solution

Die folgenden Komponenten sind enthalten:

Code	Komponente	Menge	Gefäß
WB3	<u>20x SSC Solution</u>	50 ml	Schraubdeckelflasche
	Bedienungsanleitung	1	

Die Komponente (**WB3**) ist ausreichend für 1000 ml einer 1x SSC Solution (ca. 14 Küvetten à 70 ml).

4. Lagerung und Haltbarkeit

Die Komponente muss bei Raumtemperatur gelagert werden. Unter den angegebenen Lagerungsbedingungen ist die Komponente bis zu dem auf dem Etikett angegebenen Haltbarkeitsdatum stabil.

5. Arbeitsanleitung

20x SSC Solution (WB3) ist ein 20x-Konzentrat, welches vor Benutzung verdünnt werden muss.

Die 20x SSC Solution (WB3) kann wie folgt verdünnt werden:

SSC-Endkonzentration	20x SSC Solution	deionisiertes oder destilliertes Wasser
2x SSC	20 ml	180 ml
1x SSC	10 ml	190 ml
0,5x SSC	5 ml	195 ml

Verdünnte SSC Solution ist bei 2-8°C eine Woche lang haltbar.

Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen.

Stand: 28. Juni 2010 (4.5)

Warenzeichen:

ZytoVision® ist ein Warenzeichen der ZytoVision GmbH.



ZytoVision GmbH · Fischkai 1
D - 27572 Bremerhaven · Germany
Phone: +49 (0)471/4832 - 300
Fax: +49 (0)471/4832 - 509
www.zytovision.com
info@zytovision.com



Your local distributor